


# 如何从谱仪中下载数据

一般情况下，测试完的数据会自动传输至电脑中的data文件夹，如果未自动传输过来，可以按照以下两种操作方法去找取数据。

## 1. 从文件浏览器中打开


① 从delta主界面打开文件浏览器：

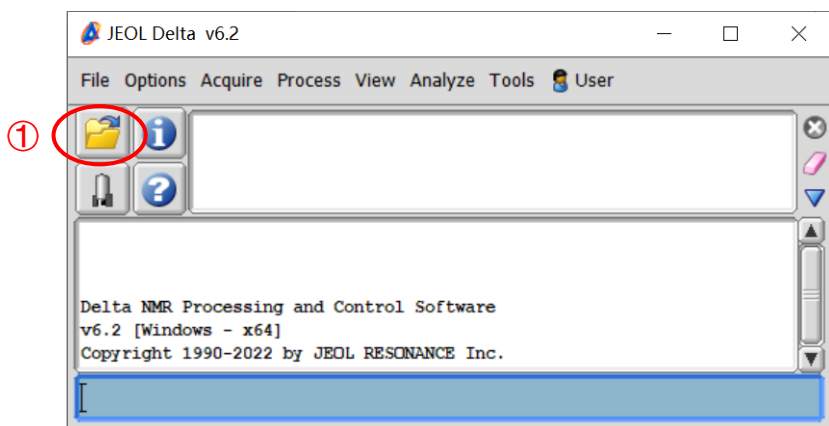

② 点开Data Servers；

③ 再点开scc，即可看见所有的实验数据；



④ 选择要打开的原始数据，点击勾选；

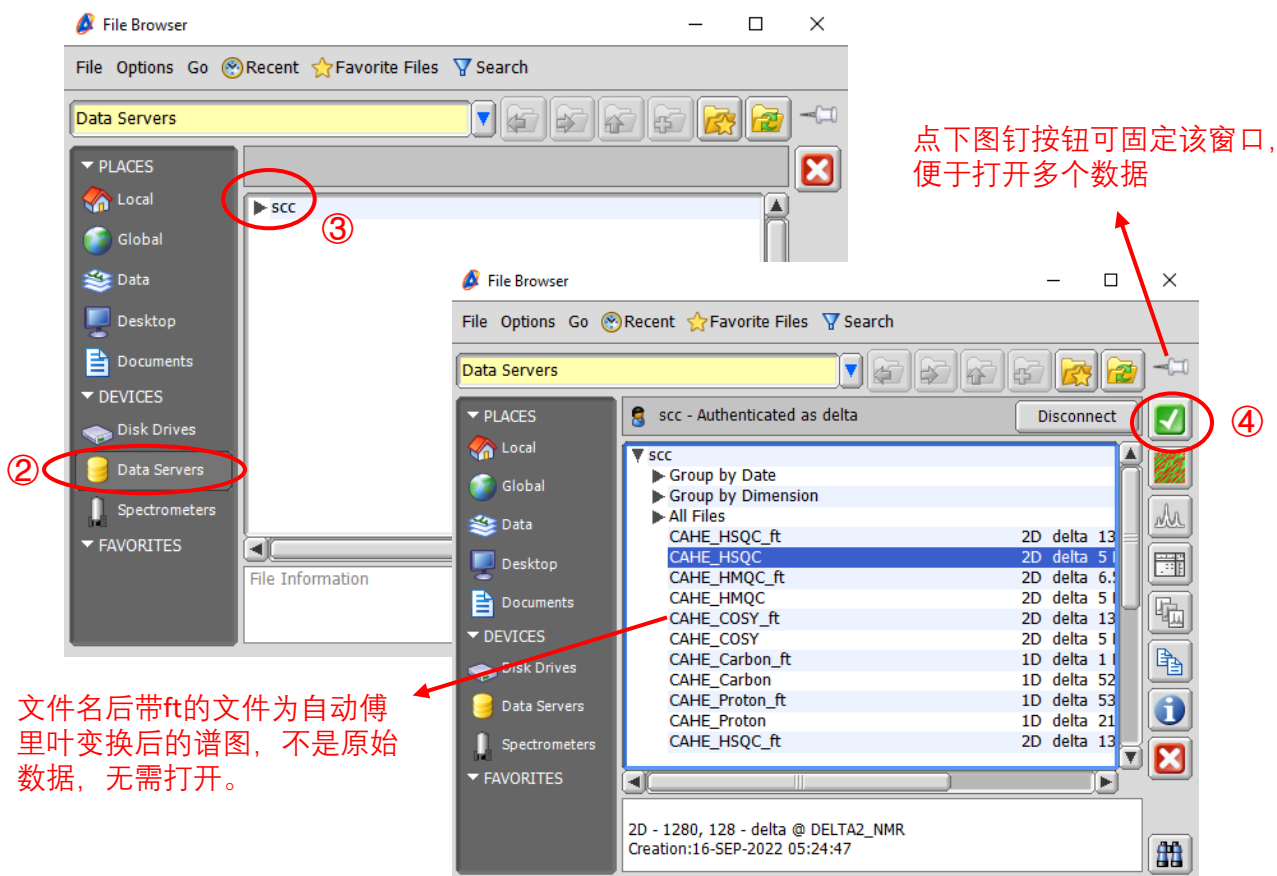

数据打开之后就会自动传输在存放数据的文件夹中

## 2. 通过remote maintenance tool到谱仪中下载数据

- ① 在开始菜单下点开JEOL文件夹，打开Remote Maintenance Tool (Instrument)；
- ② 用datum账户登录；

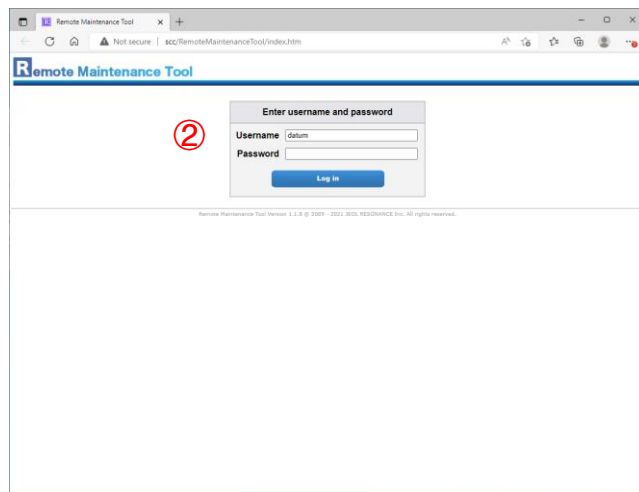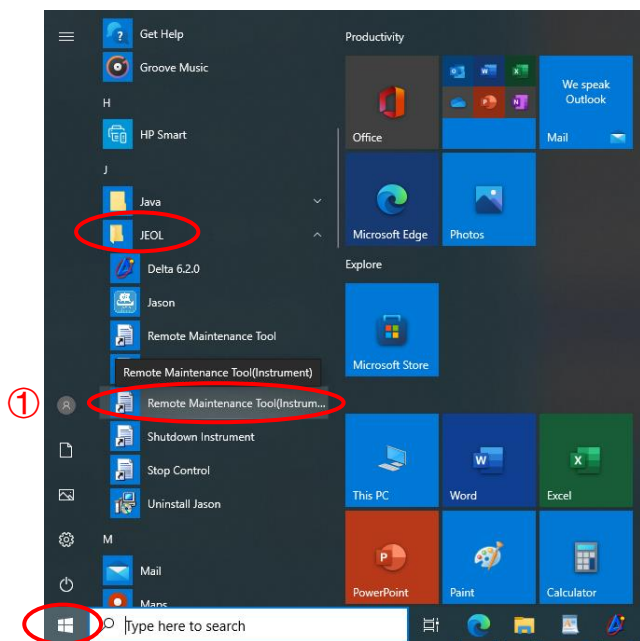

- ③ 打开File Management→勾选要下载的数据→在Folder处填入数据保存的路径→再点Download即可完成下载。

